

トラブルシューティング

- 溶解液が薬剤バイアルにうまく流入しない場合
- 上下を逆さにして操作した場合

1



青い線のついた溶解液バイアルを上にしたまま、一番下までバイアルが下がっていることを確認します。

 青い線が見えなくなるまで押し込みます。

2



注射筒を空気を抜いた状態で接続し、内筒を引くと、陰圧によって上段の溶解液が下段の薬剤バイアルに移行します。
注射筒をはずして、泡をたてないように薬剤を溶かします。
注射筒の空気を抜いたあと、再び注射筒を接続します。

3

薬剤が溶けたことを確認し、溶解操作方法の手順5～6をおこないます。

- この手順を実行しても問題が解決しない場合は、主治医へお問い合わせください。

溶解操作は動画でもご確認いただけます。



トラブルシューティングは動画でもご確認いただけます。




お問い合わせ

武田薬品工業株式会社
くすり相談室
TEL:0120-566-587
受付時間 9:00～17:30(土日祝日・当社休業日を除く)

医療機関名

アドベイト®/アディノベイト® 静注用キットを使用される方へ

アドベイト®/アディノベイト® 静注用キットの溶解方法

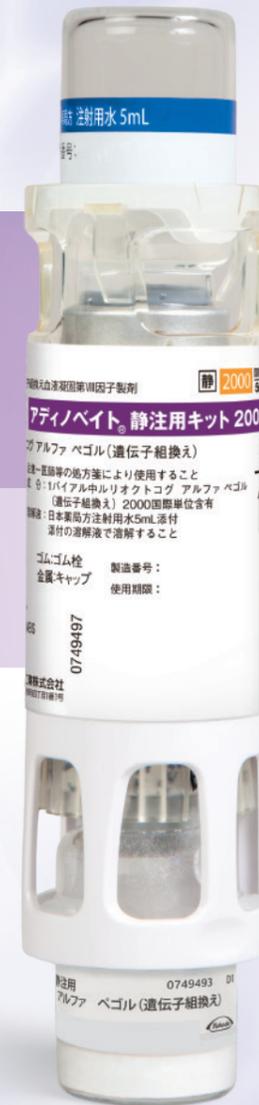

ワンアクションの 溶解操作

薬剤と注射用水 一体型のデバイスで
より衛生的で簡単な溶解を実現

 GOOD DESIGN AWARD
2018年度受賞

作成
協力

荻窪病院 和田 育子 兵庫医科大学病院 牛尾 里美
札幌徳洲会病院 土谷 貴子 広島大学病院 笹木 忍

 武田薬品工業株式会社

事前準備 ※アドベイト®静注用キットも同様の操作です。

- 操作する場所を清潔にします。
- 手を洗います。
- 本品を室温に戻します。
- 本剤と投与セットを用意します。
- パッケージの上蓋をはがします。

アディノベイト®静注用キット



投与セット

※セットには以下が含まれています。

- 注射筒
- ばんそうこう
- 廃棄用袋
- 翼状針
- アルコール綿



使用上の注意

- 本品を使用される前に、電子添文を必ずお読みください。
- 包装を開封後、すぐに使用してください。
- 使用後は感染予防に留意し、安全な方法で処分してください。
- パッケージに破損やはがれがないことを確認し、密閉されていない場合は使用しないでください。
- 本体から薬剤バイアル及び溶解液バイアルをとりはずさないでください。

複数バイアルも1本の注射筒で投与可能です

※1回あたりの投与量については、主治医の指示に従ってください。



溶解操作の基本事項

イラストは、紹介している溶解方法の一例です。最も力の入りやすい方法で正しく溶解操作を実施ください。なお、青い線のついた溶解液バイアルを上にすることに注意して溶解ください。

例



立って押す




座って押す

断面構造



作動イメージ図

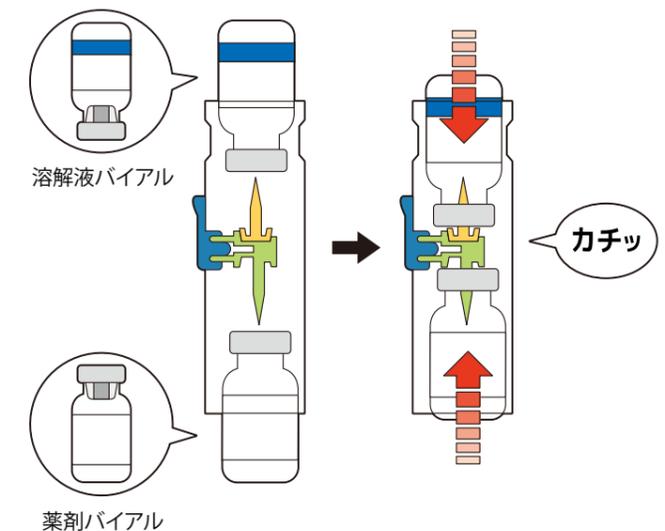

薬剤を溶解液で溶かします。バイアルキャップを全て貫通させるために、カチッと音がするまで一定量の力が必要となります。

溶解操作方法

1



青い線のついた溶解液バイアルを上にして安定した場所に置きます。



この時、青色の保護キャップははずさないでください。

2



本体の白い部分をしっかりと握り、上から手のひらで「カチッ」と音がするまで押し下げます。



溶解液バイアル・薬剤バイアルの両方が本体にささること、溶解液が薬剤バイアルに移行します。薬剤バイアルが見えなくなるまでしっかりと押し込んでください。

3



泡をたてないようにゆるやかに振り動かして薬剤を溶かします。

4



青色の保護キャップをはずし、注射筒を時計回りにねじり、固定します。



・この時、空気を本品に注入しないでください。
・注射筒接続部には触れないようにしてください。

5



本体を上下にひっくり返し、薬剤バイアルを上にした状態で傾けます。注射筒の内筒をゆっくり引き、薬液を注射筒に移行させます。



「人」の字に傾けると最後まで移行できます。

6



注射筒を本品からはずし、翼状針を接続して、ゆっくり静脈内に投与します。

● 溶解液は少し残ることがありますが、溶解には影響ありません。

● 溶解後、3時間以内に使用してください。
● 薬液が少し残ることがありますが、使用・効果には影響ありません。

サポートデバイス「カチッと安心くん2」の使い方


より簡単に溶解するために、すべり止めの補助具として「カチッと安心くん2」を準備しております。
(詳細は主治医へお問い合わせください)

カチッと安心くん2は、カチッと音が鳴るまで押し込んでいただき安心してお使いいただきたいという意味を込めて命名されています。

「カチッと安心くん2」各部の名称

- アドベイト®/アディノベイト® 静注用キットは上下がございます。青い線がある溶解液バイアル側が上になります。
- 「カチッと安心くん2」は上部装着用と下部装着用のセットで使用してください。

準備するもの

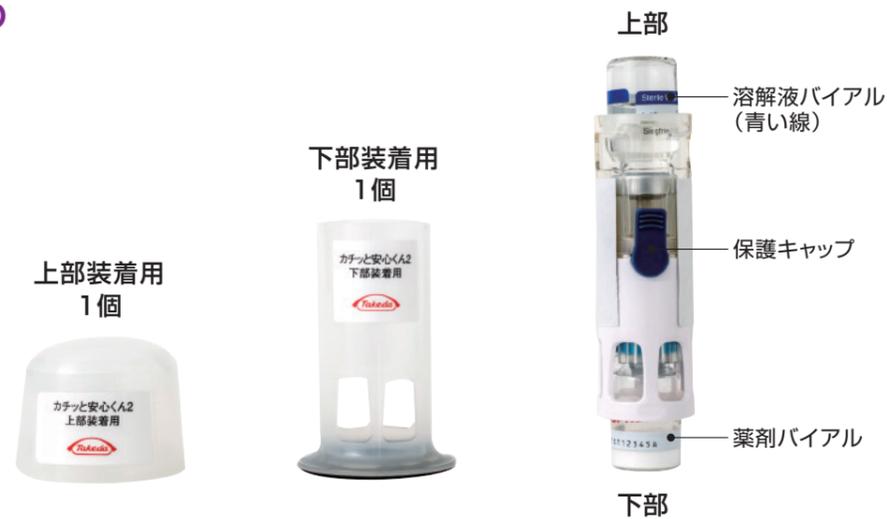

「カチッと安心くん2」使用方法

1



「カチッと安心くん2」下部装着用を安定した場所に置きます。
「カチッと安心くん2」下部装着用のみぞとキットの青い保護キャップを合わせて上から差し込んでください。

2



この時、キットの青い線のついたバイアルが上にくるようにしてください。

3



「カチッと安心くん2」下部装着用とキットが差し込んであるのを確認してから、「カチッと安心くん2」上部装着用をキットの上にかぶせてください。

4



上から「カチッと安心くん2」の上部装着用を手のひらで「カチッと」音が出るまでやや力を入れて溶解液バイアルを押し下げます。

5



「カチッと安心くん2」からキットを取り出し、溶解操作方法の手順3～6をおこないます。